



FISIOWARM[®]
400

70

TECARTHERAPY

INNOVACIÓN
EFICACIA
RESULTADO

fisiowarm.com

El Poder Marca *la Diferencia*

Fisiowarm 7.0 400

400 W no es solo un número: es lo que eleva a Fisiowarm 7.0 a un nivel superior de rendimiento terapéutico.

Energía en Profundidad

Llega a capas más profundas y a volúmenes de tratamiento mayores, garantizando una eficacia superior en menos tiempo.

Estabilidad Absoluta

Gracias a su reserva de potencia, el dispositivo funciona muy por debajo de la emisión máxima en la mayoría de las sesiones, asegurando una emisión continua y un control térmico óptimo.

Tratamientos Avanzados Atérmicos

El margen extra de potencia permite administrar alta energía con un aumento mínimo de la temperatura, gracias al modo **SUPERPULSADO (HEA)**.

Versatilidad Sin Compromisos

Perfecto para grandes áreas, tejidos profundos y pacientes deportistas donde la mayor densidad de potencia marca realmente la diferencia.

más control, más profundidad, respuesta biológica más rápida



Fisiowarm 7.0 400

más precisión, más adaptabilidad, respuesta terapéutica optimizada

**FREQUENCY
ON-DEMAND**



Con Fisiowarm 7.0 400, la frecuencia no es un límite: es una herramienta que puedes dominar con total precisión.

El sistema permite la selección manual de 300 kHz a 1 MHz, dándote la libertad de adaptar la profundidad e intensidad del tratamiento a cada escenario clínico.

El ajuste fino se consigue con regulaciones paso a paso con precisión de 1 kHz, mientras que los valores preestablecidos (300, 400, 450, 500 kHz y 1 MHz) ofrecen acceso rápido a los rangos más utilizados.

Para la máxima eficiencia, el modo AUTO escanea automáticamente todas las frecuencias preestablecidas, identificando la transferencia óptima para cada tejido.

Esta flexibilidad significa una sola cosa: el flujo de energía se adapta siempre a tu paciente, al tejido diana y a tu objetivo terapéutico — ofreciendo una respuesta tan precisa como potente.

Control de Frecuencia de Precisión



fisiowarm.com

Gestionar la Inflamación *con Precisión*

Fisiowarm 7.0 400

Atermia Graduada

Tres niveles progresivos de ATERMIA para adaptarse al estado de la inflamación:

Atermia 1 – efecto leve → fase subaguda, inflamación residual mínima.

Atermia 2 – efecto medio → inflamación moderada, dolor controlado.

Atermia 3 – efecto fuerte → fase aguda, dolor intenso, post-trauma.

Control total para adaptar el tratamiento a cada fase inflamatoria





Modo Superpulsado

Micropulsos de ultra-alta energía con generación de calor prácticamente nula.

Permite una dosificación biológica sumamente precisa, actuando de forma selectiva sobre los tejidos sin inducir fenómenos de vasodilatación no deseados.

Asegura una estimulación controlada de los procesos celulares, optimizando la respuesta regenerativa del organismo.

Favorece una intervención terapéutica segura incluso en condiciones de alta sensibilidad o fragilidad tisular.

Acelera los procesos de recuperación y reparación, garantizando la máxima eficacia clínica al mismo tiempo que protege la integridad de los tejidos más delicados.

Gestionar la Inflamación *con Precisión*



fisiowarm.com

El dispositivo más *potente y completo para*



REHABILITACIÓN MUSCULOESQUELÉTICA



REHABILITACIÓN PÉLVICO-PERINEAL



REHABILITACIÓN DEPORTIVA



FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL



fisiowarm.com

Tecnología Que Se Adapta a Ti

INTERFAZ

App Fisiowarm para iPad (incluida)

Pantalla OLED y codificador rotatorio con botón multifunción

POTENCIA NOMINAL

400 Vatios

FRECUENCIA DE TRABAJO

Ajuste manual libre: 300 kHz – 1 MHz

Regulación paso a paso con precisión de 1 kHz

Frecuencias preestablecidas: 300, 400, 450, 500 kHz, 1 MHz

Modo AUTO: escaneo automático de las frecuencias preestablecidas

EMISIÓN

Continua

Sensible

Atermia 1/2/3

Superpulsado

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Unipolar

Bipolar

Neutro Dinámico®

Automático Estático

ACCESORIOS INCLUIDOS

Kit de electrodos unipolares (capacitivos + resistivos)

Kit de electrodos bipolares (capacitivos + resistivos)

Carro con 2 cajones, uno de ellos calefactado

ACCESORIOS COMPATIBLES

Gama completa de electrodos y aplicadores

TRANSFERENCIA DE ENERGÍA

Capacitiva

Resistiva

PROGRAMAS PREESTABLECIDOS

56 protocolos que pueden integrarse en nuevas versiones de la app y modos avanzados



Fisiowarm 7.0 400

Ficha técnica

AMV HEA YURI SAFE FREQUENCY ON-DEMAND LOWVOLTAGE CAPACITIVE

Intimty ThermoSense Intracavitary

La nueva sonda **intimty ThermoSense** está específicamente diseñada para tratamientos pélvicos y ginecológicos, llevando la seguridad, el confort y la precisión a un nivel superior.

Fabricada en acero quirúrgico (Disponible en versiones hemisféricas de 20 mm y 12 mm) con funda protectora de Delrin, **ThermoSense** garantiza la máxima higiene y fácil esterilización, mientras que su **mango ergonómico de policarbonato** asegura una maniobrabilidad y comodidad completas durante el uso clínico.

En su núcleo se encuentra un avanzado termómetro digital con **precisión de $\pm 0,1$ °C**, alimentado por tecnología **Energy Harvesting** — sin necesidad de baterías ni fuentes externas. Con retroalimentación de **temperatura en tiempo real**, límites automáticos y alarmas sonoras a partir de 40 °C, los profesionales tienen control total de la seguridad tisular durante toda la sesión.

ThermoSense permite alcanzar y mantener rangos térmicos precisos — desde un calentamiento suave hasta una hipertermia segura — optimizando la síntesis de colágeno, el metabolismo tisular y los resultados terapéuticos en menos sesiones, garantizando siempre el confort del paciente.



fisiowarm.com

***Fisiowarm ThermoSense: más seguridad,
más precisión, mayor confianza del paciente***

Especificaciones técnicas

SONDA

Sonda de acero quirúrgico, Ø 20 mm hemisférica.
Sonda de acero quirúrgico, Ø 12 mm hemisférica.
Separador de Delrin, Ø 12 mm, para mayor maniobrabilidad.
Longitud total de la sonda: 100 mm
Protector de Delrin extraíble y reemplazable
Todas las partes de la sonda endocavitaria pueden desinfectarse/esterilizarse en frío.

PIEZA DE MANO

Pieza de mano ergonómica de policarbonato
Soporte magnético para superficies metálicas
Amplia ventana con pantalla LCD reflectante
Cable de conexión Fisiowarm FLEX
Soporte de sobremesa.

TERMÓMETRO


Termómetro digital con precisión de $\pm 0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$
No necesita alimentación externa: sin adaptador ni pilas
Fuente de alimentación Energy Harvesting:
recuperación de energía a partir de la salida RF
Límites automáticos de temperatura (ALTA / BAJA)
Alarmas acústicas a partir de $40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Autocalibración
Tiempo mínimo de respuesta: $2\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$.




No son simples Accesorios, *sino Herramientas de Excelencia*



Con **IASTM** y Fisiowarm 7.0 400 puedes aprovechar la selección de frecuencia para tratar la fascia con precisión. Más frecuencias significan mayor exactitud terapéutica.

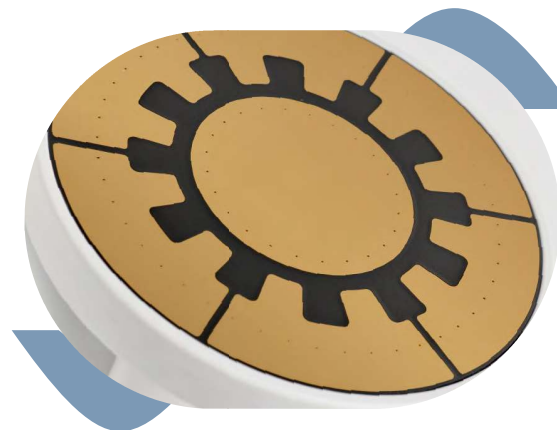

Con **UNIQ** en modo superpulsado puedes tratar fases agudas con máxima precisión: menos calor, más control, más seguridad.

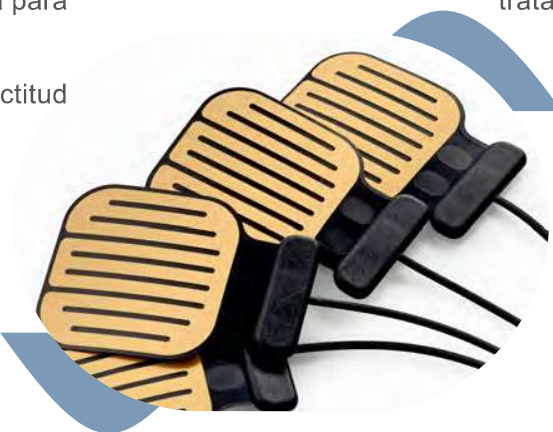

OCTOPUS, combinado con los tres modos atérmicos, trabaja de manera independiente sin el operador: suministrando energía constante y uniforme sin mover los electrodos.



fisiowarm.com

Piezas de mano magnéticas, siempre al alcance.

Gracias al sistema de acoplamiento magnético, las piezas de mano Fisiowarm pueden colocarse de forma rápida y sin esfuerzo directamente en el dispositivo.

Un gesto natural que garantiza **orden, comodidad y rapidez** durante la práctica clínica: sin soportes voluminosos, sin pérdida de tiempo buscando herramientas.

Todo es intuitivo, **ergonómico y siempre listo para** usarse, convirtiendo el tratamiento en una experiencia fluida y profesional.



Donde los Detalles
Definen la Excelencia

Cajón calefactado para el máximo confort del paciente

Carro exclusivo con 2 cajones

Un cajón calefactado para mantener los electrodos calientes

Diseño cerrado → mejor protección y organización

Apariencia más robusta y de alta gama

Ideal para clínicas estructuradas y uso intensivo diario.



FISIOWARM®

**INNOVACIÓN
EFICACIA
RESULTADO**

25 años de experiencia en tecarterapia y más de 70 años de historia de Golden Star inspiraron el desarrollo de Fisiowarm 7.0 400, un dispositivo de vanguardia que — junto con sus accesorios únicos e innovadores — redefine los estándares del mercado. Trabajando directamente con profesionales del sector, hemos combinado diseño, funcionalidad y alto rendimiento para ofrecer una solución avanzada y completa. Nuestro objetivo es abrazar nuevas fronteras e innovaciones tecnológicas, trazando el camino hacia el futuro del MedTech.

fisiowarm.com

Fisiowarm 7.0 400 viene con un iPad de 11 pulgadas. El dispositivo que se muestra en las imágenes cuenta con un iPad de 13 pulgadas, disponible como accesorio opcional.

La Línea FISIOWARM®
está íntegramente
diseñada y fabricada
en Italia.

CE
1370
**MADE IN
ITALY**

DISTRIBUIDOR OFICIAL CATALUÑA / BALEARES



CIM SALUT S.L.

📍 C/ de la Font 32, 08243 Manresa (Barcelona)

🌐 www.cimsalut.com

✉ carles.vazquez@cimsalut.com

✉ montse.planas@cimsalut.com

☎ 669263862 📞 639242267 📧 info@goldenstar.it

📱 @cimsalut